

**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:**

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο σαν βοήθημα κλίνης και για την ανύψωση πλάτης ατόμων που είναι στο κρεβάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

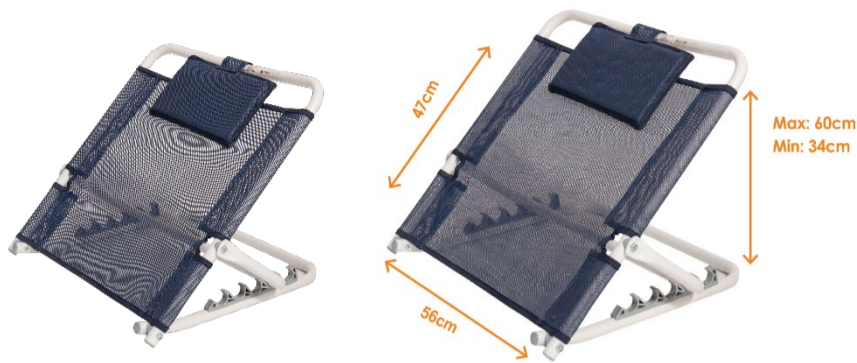
Σε περίπτωση που το χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είναι πιθανό να προκληθεί ατύχημα ή κάποια ζημιά στο προϊόν.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:**

Διαστάσεις (ΜxΠ): 56cm x 47cm.

5 διαφορετικές θέσεις ρύθμισης από 25 έως 80 μοίρες.

Με Ύψος 34 έως 60 cm

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:**

- Το προϊόν έρχεται συναρμολογημένο, έτοιμο για χρήση.
- Το μέγιστο βάρος χρήστη 75 Kg δεν πρέπει να υπερβαίνεται.
- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι σωστά συναρμολογημένο σε σταθερή θέση.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε επιφάνεια χωρίς εμπόδια.
- Ο κίνδυνος τραυματισμού των δακτύλων μπορεί να αυξηθεί κατά τη διαδικασία τοποθέτησης.
- Για κανένα λόγο, Μην τροποποιείτε το προϊόν και τα εξαρτήματά του.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οι ρωγμές και οι παραμορφώσεις μπορούν να επηρεάσουν έντονα την απόδοση και την ασφάλεια της συσκευής.
- Μετά τη χρήση, το προϊόν πρέπει να αφαιρεθεί από το χώρο για να αποφευχθεί τυχόν εμπόδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για διαφορετικό σκοπό από το προβλεπόμενο.
- Το προϊόν δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε εξωτερικούς χώρους.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:**

Η συντήρηση του προϊόντος περιλαμβάνει τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση και το κατάλληλο επίπεδο υγιεινής, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί αυτές τις διαδικασίες πριν από κάθε χρήση.

Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει τη δομική ακεραιότητα του προϊόντος και των εξαρτημάτων αυτού. Για τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πρέπει να φοράτε γάντια.
2. Αφαιρέστε τις εμφανείς ακαθαρσίες πριν προχωρήσετε σε πιο λεπτομερή απολύμανση.
3. Χρησιμοποιήστε νερό ή ήπιο απορρυπαντικό για τη διαδικασία καθαρισμού.
4. Σκουπίστε με ένα στεγνό και καθαρό πανί.

**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ:**

Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση από άλλους χρήστες. Πριν από την επαναχρησιμοποίηση από άλλους, το προϊόν πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί σωστά και να ελεγχθεί από εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.

**ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ:**

Μην πετάτε το προϊόν στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε εκ των προτέρων από την τοπική σας αρχή τον σωστό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο για να το απορρίψετε.

**ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:**

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος που αφορά το προϊόν, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή αυτού του προϊόντος στη διεύθυνση [mobiakcarequality@mobiak.com](mailto:mobiakcarequality@mobiak.com).

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ:**

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

**ΕΓΓΥΗΣΗ:**

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθιρόμενα μέρη όπως την ταπετσαρία και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασμα του χρόνου. Επίσης ΔΕΝ καλύπτονται ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή & εταιρίες μεταφορών.

**INTENDED USAGE:**

The product is designed as a bed aid and for back lifting of people who are in bed for a long time.

If you use it in any other way, it is likely to cause an accident or damage to the product.

**PRODUCT CHARACTERISTICS:**

Dimensions (LxW): 56 x 47cm.

5 different adjustment positions from 25 to 80 degrees.

With Height 34 from 60 cm

**SAFETY WARNINGS AND INDICATIONS:**

- The product is assembled, ready for use.
- The maximum user weight is 75 Kg.
- Before every use, be sure the product is correctly assembled in a stable position.
- The product can be used only on surface that are free from obstacles.
- The risk of finger injuries may increase during the mounting or assembling process.
- Do not modify the product and its components in any way.
- Do not use the product if damaged or altered in any way. Cracks and deformations may strongly affect the performances and safety of the device.
- After use, the product should be removed from the bed to avoid any obstruction.
- Do not use the product for a different purpose from the intended one.
- The product must not be stored outdoors.

**MAINTENANCE INFO:**

The products maintenance consists of the cleaning and sanitation procedures. In order to guarantee a safe use and adequate standard of hygiene, the user should perform these procedures before every use.

The user has to make certain of the structural integrity of the device and its components. For cleaning and sanitation procedures, follow the steps below:

1. Gloves should be worn.
2. Remove the evident dirt before to proceed with the most accurate disinfection.
3. Use water or mild detergent for the cleaning procedure.
4. Wipe with a dry and clean cloth.

**REUSE REQUIREMENTS:**

The product is suitable for reuse by other users. Before reuse by others, the product must be correctly cleaned and sanitized and must be checked by qualified dealers.

**CORRECT DISPOSAL PROCEDURE:**

Do not dispose the product in the normal household waste. Ask your local authority beforehand for the correct and environmentally friendly way to dispose it.

**INCIDENT REPORTING:**

If there was a serious incident involving this product, contact the manufacturer of this product at [mobiakcarequality@mobiak.com](mailto:mobiakcarequality@mobiak.com)

**DECLARATION OF CONFORMITY:**

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

**WARRANTY:**

The product is guaranteed for a period of one (1) year from the purchasing date. The warranty covers factory defects & DOES NOT cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse or non-compliance with the product's operating instructions. Also DOES NOT cover the parts that can wear out during use or over time, like the upholstery. Also DOES NOT cover damages or defects caused by natural disasters, unauthorized maintenance or repair and supply carriers problems.